

# HyCyte™ 人牙髓间充质干细胞专用培养基

## Human Dental Pulp Stem Cells Growth Medium

货号：DPHX-G101

规格：500 mL/Kit

### 产品组分

组分	规格	保存条件	有效期
Human Dental Pulp Stem Cells Basal Medium	440 mL	2~8°C, 避光	12 months
Human Dental Pulp Stem Cells Fetal Bovine Serum (FBS)	50 mL	-20°C	24 months
Penicillin-Streptomycin 双抗	5 mL	-20°C	12 months
Glutamine 谷氨酰胺	5 mL	-20°C	12 months

**NOTE:** 产品冰袋冷藏运输，所有试剂无菌分装可直接配制使用。

配制方法：FBS置于2~8°C融解。双抗和谷氨酰胺室温融解。将FBS、双抗和谷氨酰胺全部加入Basal Medium后，混匀即为完全培养基，可直接使用。完全培养基保存条件：2~8°C，避光；配制后有效期：3 months。

### 产品描述

HyCyte™ 人牙髓间充质干细胞专用培养基由Cas9X海星生物技术团队精心优化，可增强人牙髓间充质干细胞的增殖特性，经多次传代之后仍可维持其成骨、成脂及成软骨诱导分化能力。

本产品已包含人牙髓间充质干细胞生长的各种成分，可直接用于人牙髓间充质干细胞的体外培养。

### 质检标准

pH: 7.2~7.4


内毒素含量: < 10 EU/mL

生物安全: 细菌、真菌、支原体检测阴性

性能测试: 通过细胞培养测试

### 注意事项

本产品仅用于科研实验，不可用于临床治疗。  
使用产品时应注意无菌操作，避免污染。

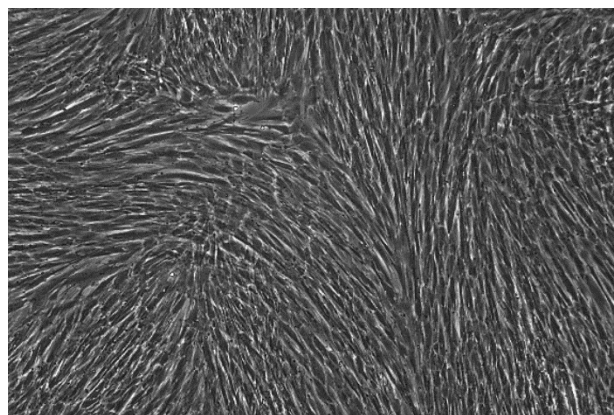

人牙髓间充质干细胞-40×

为科研加速，为工业赋能！



关注海星公众号



关注海星视频号

