


产品使用说明书

人结直肠腺癌细胞 COLO 320DM

货号：TCH-C162

规格：1×10⁶ cells/T25 培养瓶

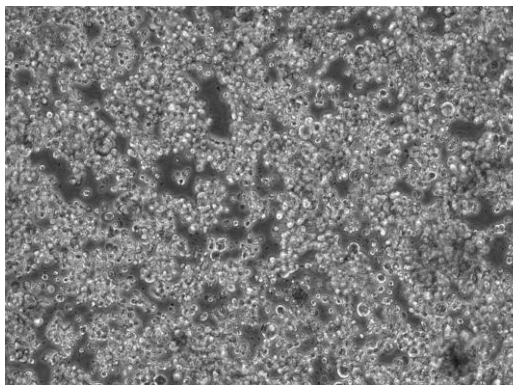

COLO 320DM 细胞可产生 5-羟色胺、去甲肾上腺素、肾上腺素、ACTH 和甲状旁腺素。COLO 320DM 细胞角蛋白、波形蛋白弱阳性。

产品说明

细胞名称	人结直肠腺癌细胞
细胞简称	COLO 320DM
种属来源	人
组织来源	结肠
细胞形态	圆形
生长特性	半贴半悬
培养体系	培养体系：RPMI-1640 + 10%FBS（胎牛血清）+ 1% P/S 推荐使用海星配套 COLO 320DM 细胞专用培养基，货号：TCH-G162
消化时间	胰蛋白酶-EDTA 消化液（0.25%）含酚红（胰酶）在 37°C 消化 1-2min。 注：不同品牌胰酶不同细胞密度消化时间略有区别，以大部分细胞变圆脱落为准。
注意事项	常温细胞首次收货建议 1: 2 传代
传代比例	5×10 ⁵ -1×10 ⁶ cells/mL，每 2-3 天换液一次
培养环境	气相：95%空气+5%二氧化碳，温度：37°C
冻存条件	冻存条件：60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 推荐海星 HyCyte® 一步冻存液（即用型、无血清、无需程序降温），货号：GUCP-R201 保存条件：液氮储存
安全性	所有肿瘤细胞和病毒转染的细胞均视为有潜在的生物危害性，建议在二级生物安全台内操作，并做好个人防护。
用途	仅供科研使用

MX221A6-20250409

为科研加速，为工业赋能！



海星商城二维码



公众号二维码

